

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- BLANK PAGES


**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

<b>THOMSON</b>  <b>DELPHION</b>		<b>RESEARCH</b>	<b>PRODUCTS</b>	<b>INSIDE DELPHION</b>
<a href="#">Log Out</a>	<a href="#">Work Files</a>	<a href="#">Saved Searches</a>	<a href="#">My Account</a>   <a href="#">Products</a>	Search: <a href="#">Quick/Number</a> <a href="#">Boolean</a> <a href="#">Advanced</a>

## The Delphion Integrated View

Buy Now:  <a href="#">PDF</a>   <a href="#">More choices...</a>	Tools: Add to Work File: <a href="#">Create new Work File</a>
View: <a href="#">Expand Details</a>   <a href="#">INPADOC</a>   Jump to: <a href="#">Top</a> <input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Go to: Derwent...</a>	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">Email</a>

**Title:** **EP0416150A1: Subminiature therapeutic laser apparatus for the biostimulation of organictissue**

**Country:** EP European Patent Office (EPO)

**Kind:** A1 Publ. of Application with search report (See also: EP0416150B1)

**Inventor:** Oppold, Eberhard, Dipl.-Ing.;

**Assignee:** Oppold, Eberhard, Dipl.-Ing.  
[News, Profiles, Stocks and More about this company](#)

**Published / Filed:** 1991-03-13 / 1989-09-07


**Application Number:** EP1989000116523

**IPC Code:** A61N 5/06; A61H 39/00;

**Priority Number:** 1989-09-07 EP1989000116523  
 1989-09-07 EP1989089116523

**Abstract:**

An apparatus for the biostimulation and treatment of organic tissue is described, which apparatus is distinguished by its minimal size with a housing volume of approximately 50 cm<sup>3</sup> and a short focal distance of the focused laser radiation (8). Provided in the beam path of the apparatus is at least one convex lens (2) which in terms of function is used for adjustable focusing between the laser radiation outlet opening and the interior of the housing. The laser is a cw diode laser (1) in the visible red to near infrared wave range (600-1100 nm), preferably 780 nm or 670 nm, with a design-related optical output of 0.5 to 10 mW, which in this apparatus, as a result of the great divergence of the laser beam in the further course of the beam, does not represent any risk to the human eye and at the same time has a relatively high power density (8) acting on the surface to be treated. A sensor ring (7) at the beam outlet opening assumes the function of a barrier.

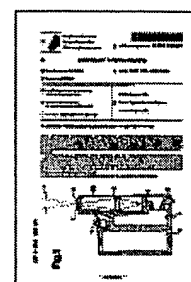

**INPADOC Legal Status:** [Show legal status actions](#)  
[Report](#)

**Buy Now:** [Family Legal Status](#)

**Designated:** AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

Country:

Family: [Show 4 known family members](#)


Description: [Expand full description](#)

- + [Stand der Technik](#)
- + [Kritik am Stand der Technik](#)
- + [Aufgabe](#)
- + [Lösung](#)
- + [Erzielbare Vorteile](#)

First Claim: [Show all claims](#)


1. Subminiatur-Therapie-Lasergerät zur Biostimulation von organischem Gewebe, bevorzugt einsetzbar zur therapeutischen Behandlung von Herpes simplex zur Laser-Akupunktur und zur Schmerzbekämpfung, dadurch gekennzeichnet, daß es bei einem Gehäusevolumen von ca. 50 bis 65 cm<sup>3</sup> batterie- oder akkubetrieben ist und die verwendete cw-Laserdiode im sichtbaren roten bis nahen IR-Bereich mit einer optischen Leistung von 0,5 bis 10 mW liegt und der Laserstrahl durch wenigstens eine Konvexlinse so fokussiert wird, daß auf dem zu therapierenden Gewebe eine relativ hohe Leistungsdichte vorliegen kann und zugleich geringe Gefahr für das menschliche Auge besteht, bedingt durch die große Divergenz und geringe Leistungsdichte im weiteren Verlauf des Laserstrahles.

Forward  
References:

Buy PDF	Patent	Pub.Date	Inventor	Assignee	Title
	<a href="#">US6306160</a>	2001-10-23	Nidetzky; J. Leopold	Myles Limited	<a href="#">Soft laser with an integrated finder for acupuncture points</a>

Other Abstract  
Info:

None

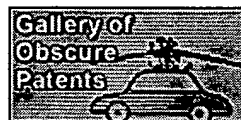

[Nominate this for the Gal](#)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



Europäisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 416 150 A1**

12

## EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 89116523.5

51 Int. Cl.<sup>5</sup>: **A61N 5/06, A61H 39/00**

22 Anmeldetag: 07.09.89

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
13.03.91 Patentblatt 91/11

W-6390 Usingen 1(DE)

84 Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

72 Erfinder: **Oppold, Eberhard, Dipl.-Ing.**

W-6390 Usingen 1(DE)


71 Anmelder: **Oppold, Eberhard, Dipl.-Ing.**

54 **Subminiatur-Therapie-Lasergerät zur Biostimulation von organischem Gewebe.**

57 Es wird ein Gerät zur Biostimulation und Therapie von organischem Gewebe beschrieben, das sich durch seine minimale Größe mit einem Gehäusevolumen von ca. 50 cm<sup>3</sup> und einer kurzen Brennweite der fokussierten Laserstrahlung (8) auszeichnet. Im Strahlengang des Gerätes ist mindestens eine Konvexlinse (2) vorgesehen, die funktionsmäßig einer verstellbaren Fokussierung zwischen Laserstrahlaustrittsöffnung und dem Gehäuseinneren dient.

Der Laser ist ein cw-Diodenlaser (1) im sichtbaren roten bis nahen infraroten Wellenlängenbereich (600 - 1100 nm), vorzugsweise 780 nm oder 670 nm, mit einer Bauart bedingten optischen Ausgangsleistung von 0,5 bis 10 mW, der in diesem Gerät, durch die große Divergenz des Laserstrahls im weiteren Verlauf, keine Gefahr für das menschliche Auge darstellt und zugleich auf der zu therapierenden Oberfläche eine relativ hohe zur Wirkung kommende Leistungsdichte (8) hat.

Ein Sensorring (7) an der Strahlaustrittsöffnung übernimmt die Funktion einer Einschaltsperrle.

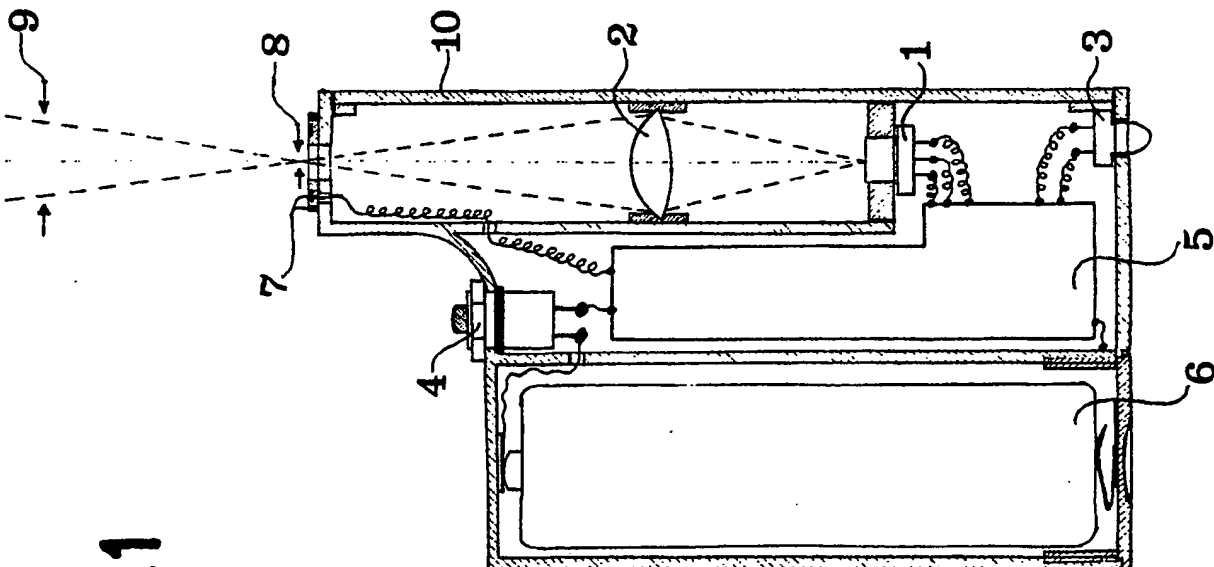

**Fig.1**

EP 0 416 150 A1

## SUBMINIATUR-THERAPIE-LASERGERÄT

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Subminiatur-Laser-Gerät zur therapeutischen Bestrahlung von organischem Gewebe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Die vorgegebene minimale Größenordnung der Gehäuseabmessungen soll es trotzdem ermöglichen, ein Therapielasergerät im Leistungsbereich von 0,5 bis 10 mW mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen, relativ hoher Leistungsdichte, verstellbarer Strahlfokussierung und einer Funktionskontrolle als ständigen ungefährlichen "Begleiter" für den Benutzer zu beinhalten.

Stand der Technik

10

Ähnliche Geräte sind in größerer Ausführung als sogenannte Mid- oder Soft-Laser in der Medizin bekannt. Sie sind üblicherweise als netzgespeiste Stand- oder Tischgeräte ausgebildet und werden im Rahmen einer medizinischen Praxis im ambulanten, bzw. stationären Bereich eingesetzt. Ihr bioregulatorischer Effekt ist vielfach bewiesen. Unter Prof. Endre Mester wurden seit 1967 Versuche durchgeführt, die das in zunehmendem Maß weitgehend bestätigten. Eine Zusammenfassung der Versuche findet man zum Beispiel in der Arbeit von Prof. E. Mester: "Laser Application in Promoting of Wound-Healing", die in "Laser in Medicine", Ausgabe 1980, veröffentlicht ist (Herausgeber: H.K. Koebner, Wiley-Interscience Publ. 1980). Eine weitere Zusammenfassung der Versuche von Prof. Mester "Der Laser" wurde herausgegeben von K. Dinstlund P.L. Fischer, Springer Verlag 1981.

20

Dr. G. Lonauer weist in der Zeitschrift "Die Medizinische Welt" 29/85 in dem Artikel "Konservative Lasertherapie auf die Erfolge von Dr. Ludtmann bei der Bestrahlung von Herpes-simplex-Infektionen mit MID - Laser - Bestrahlung hin.

Frau Dr. J. Hachenberger-Wildner berichtet in der Zeitschrift "Ärztliche Kosmetologie", Heft 2, März/April 1981, S. 142-144, "Laserstrahlen bei Herpes-Erkrankungen" über Erfahrungen bei der Bestrahlung mit 632,8 nm (He-Ne) Laser. Sie weist auf folgendes hin: " Die praktische Durchführung der Bestrahlung ist abhängig von der Leistung des Lasers. Hiernach richten sich Bestrahlungsabstand und -zeit."

Zu Herpes simplex: "Unabhängig von der Größe und der Lokalisation des Herdes waren in der Regel 1 bis 3 Bestrahlungen erforderlich. Die Abheilung konnte damit innerhalb 1 bis 3 Tagen erreicht werden. Je früher die Patienten zur Behandlung kamen desto schneller war der Erfolg zu verzeichnen."

Dr. Josef Bahn weist in seinem Buch "Laser- und Infrarotstrahlung in der Akupunktur" (Haug 1987) auf Seite 36 zuletzt darauf hin, daß in manchen Fällen bei Herpeserkrankungen doch mehr Behandlungen - oft 7 bis 10- erforderlich sind.

Dr. Ulrich Warnke (Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Fachbereich 16.4 Biologie) trifft in der Veröffentlichung "Der Dioden Laser" die kalkulierte Feststellung für gepulste Diodenlaser um 900 nm: Intakte Zellen werden von der Laserstrahlung im Ergebnis keine Änderung erfahren, während "kranke" Zellen energetisch aufgebaut werden können. Dt. Ärzteblatt 84, Heft 44, 29.10.87.

Bei Geräten mit Laserstrahlaufweitung wird ein Dauerstrich-Laser mit 633 nm He-Ne beschrieben, der mit einem 840 nm IR-cw-Laser überlagert ist, dessen Strahl bis 30 mm aufgeweitet wird, um das zu bestrahlende Feld in der Fläche variabel zu gestalten (Offenlegungsschrift v.6.8.87 DE 3603156 A1 ; A 61N 5/06).

In der Patentschrift DE 2548354 C2 (A 61 N 5/06) wird ein begründet nicht fokussierter 2 mW cw-Laser mit elektromechanischer Vorrichtung zur Modulierung des Laserstrahles im Bereich von 2 bis 20 Hz dargestellt, der besonders für die Laser-Akupunktur konzipiert wurde. Auf Seite 2 (9-20) wird auf den vermeintlichen Vorteil eines größeren Strahldurchmessers bei Bestrahlung der Akupunkturpunkte hingewiesen.

Im Lehrbuch von Berlien und Müller "Angewandte Lasermedizin", herausgegeben vom Laser-Medizin-Zentrum Berlin 1989, erschienen im Ecomed Verlag mbH, Landsberg-München-Zürich weist Dr.med.vet. J.H. Walter unter 11-3.1 "Eigenschaften von biologischen Geweben", Seite 2, auf folgendes hin: Bedeutsamkeit der Laserstrahlstreuung im biologischen Gewebe, besonders im Bereich der Wellenlänge von 590 nm bis 1500 nm. Es wird angeführt, daß im biologischen Gewebe dieser Wellenlängen die kollimierte Strahlqualität verloren geht und durch einen diffusen Streukegel ersetzt wird.

Im gleichen Lehrbuch weist Dr.rer.nat. H. Dörschel, Berlin unter II - 2.3 auf Seite 3 darauf hin, daß die Leistungsdichte und die Einwirkzeit die hauptsächlichen Parameter eines Laserstrahls sind, die die Wirkung auf Gewebe beeinflussen. Dabei gilt



$$\text{Leistungsdichte} = \frac{\text{Laserstrahlleistung}}{\text{Strahlquerschnitt}}$$

5

Zur technischen Spezifikation der einzelnen Lasereinrichtungen zur Biostimulation schreibt Dr.rer.nat., Dipl.-Ing. R. Senz, Berlin, in "Angewandte Lasermedizin" unter II - 3.2, Seite 2: "Bis heute ist nicht bekannt, welche Wellenlänge die am besten geeignete für biochemische Reaktionen im Bereich der Biostimulation ist. Wellenlängen im Bereich von 442-1064 nm sind hierzu untersucht worden." Aus dem Bereich der praktischen Anwendung gibt es viele Studien mit zum Teil kontroversen Ergebnissen. Es werden Laserlicht-  
 10 - Behandlungen mit Helium-Neon (633 nm) oder Gallium - Arsenid (904 nm) oder eine Kombination aus beiden beschrieben. Einige benutzen Dauerstrichlaser (cw), andere jedoch gepulste oder modulierte Systeme. Senz schreibt hierzu auf Seite 3: "Es gibt jedoch keine systematischen Studien, die eine Korrelation zwischen Wellenlänge und biologischem Effekt aufzeigen. Weiterhin werden recht verschiedene Energiedichten am Gewebe eingesetzt. Dies erklärt auch die recht unterschiedlichen Ergebnisse der  
 15 verschiedenen Arbeitsgruppen."

Auf dem Weg zur Miniaturisierung sind sogenannte Pocket-Laser mit einem Gehäusevolumen von über 65 cm<sup>3</sup> und einer Gesamtlänge von z.Teil mehr als 14 cm bekannt, die mit 633nm (He-Ne) oder 670 nm (InGaAlP Dioden) hauptsächlich als Pointer, Richtlaser, Positionierlaser und Pilotstrahl Verwendung finden.  
 20 Da sie eine feststehende Kollimatoroptik mit nahezu parallelem Laser -Ausgangsstrahl großer Reichweite aufweisen, ist bei ihrem Betrieb eine Gefährdung des menschlichen und tierischen Auges bei optischen Ausgangsleistungen von  $\geq 1\text{mW}$  im cw - Betrieb nicht auszuschließen.

#### 25 Kritik am Stand der Technik

Mid- oder Soft-Lasergeräte, die in der Medizin Anwendung finden, sind durch ihre Baugröße bedingt als ständige "Begleiter" in der Hosenträger-, Hemden- oder Handtasche ungeeignet, obgleich es für den Bereich der Eigentherapie, wie z.B. bei Herpes simplex - Erkrankungen, für die Laser-Akupunktur, die akute Schmerzbekämpfung und bei ambulanter Biostimulation wünschenswert ist. Die vorhandenen sogenannten Pocket -  
 30 Laser sind wegen ihrer zu geringen Leistungsdichte (z.B. 1mW bei 4mm festem Austrittsstrahldurchmesser) und mangelhafter, bzw. fehlender Sicherheitsvorkehrungen als Therapielaser ungeeignet. Außerdem sind sie noch zu groß, um sie in einer Hemden- oder Hosenträger tasche problemlos wie ein Feuerzeug tragen zu können und somit immer zur Verfügung zu haben.

35

#### Aufgabe

Hieraus ergibt sich die Aufgabe, ein batterie- oder akkubetriebenes miniaturisiertes Therapie-Lasergerät zu konstruieren, das mit kostengünstigen cw-Laserdioden kleiner und mittlerer Leistung auf den zu behandelnden Oberflächen von organ. Gewebe die zur Biostimulation und Therapie erforderlichen Leistungsdichten durch die entsprechende Aufbereitung des Laserstrahls erreicht. Zugleich muß das Gerät die für seinen Leistungsbereich erforderlichen technischen Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen besitzen, die die Augen des Benutzers und sein gefährdetes Umfeld vor einem Laserstrahl mit hoher Leistungsdichte  
 45 schützen und zugleich eine sichere und leicht überprüfbare Funktion des Gerätes garantieren.

#### Lösung

Die Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen Einrichtung durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

Zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung sind nachfolgend anhand der Zeichnungen beschrieben. Es zeigen:

Fig .1 Schematisch vereinfacht dargestelltes Subminiatur-Therapie-Lasergerät im Maßstab 2 : 1 mit integriertem Gleichspannungswandler.

Fig .2 Schematisch vereinfacht dargestelltes Subminiatur-Therapie-Lasergerät im Maßstab 2 : 1 in Seitenansicht A für den Betrieb mit 3 Micro-Batterien und höherer Laserdioden-Ausgangsleistung.

Fig.3 Seitenansicht B der Darstellung von Fig .2

Fig. 4 Subminiatur-Therapie-Lasergerät in Originalgröße mit dem mobilen Laserleistungs- und Modulationsmeßgerät, schematisch sehr vereinfacht dargestellt.

Um ein solches Subminiatur-Therapie-Lasergerät bis zu einer Leistung von ca. 5mW zu fertigen, wird entsprechend dem Beispiel von Fig. 1 (Maßstab 2 : 1) mit einer Spannungsquelle (6) von 1 bis 1,6 Volt gearbeitet, die hier als Mignonzelle ausgebildet ist. Die für die Speisung der cw - Laserdiode erforderliche Spannung wird mit Hilfe eines integrierten Schaltkreises in SMD - Bauweise bereitgestellt, der 5 Volt Ausgangsspannung liefert und einen Teil der Steuerelektronik (5) darstellt.

Entsprechend dem Unteranspruch 3 ist es für höhere opt. Ausgangsleistung bei der Verwendung von cw-Dioden bis ca. 10 mW Laserausgangsleistung sinnvoll, mit drei Alkaline-Batterien oder Ni-Cad-Sinterzellen Fig.3 (13, (5 14, 15) geringer Baugröße zu arbeiten, da der Miniaturisierung von Gleichspannungswandlern bei größerem Strombedarf und gefordert hohem Wirkungsgrad durch physikalische Gesetzmäßigkeiten und zur Zeit verfügbare Bauteile deutlich Grenzen gesetzt sind.

Um das Gerät für den Benutzer und sein Umfeld technisch sicher zu gestalten, ist entsprechend dem Unteranspruch 4 eine elektronische Einschaltsperrung (7) so angeordnet, daß ein Einschalten des Gerätes mit dem Druckknopfschalter (4) nur dann möglich ist, wenn zugleich der Sensorring (7) mit der Haut des Patienten oder Benutzers Kontakt hat. Die dazu erforderliche Elektronik ist in (5) oder (12) angeordnet.

Da sich der Sensorring (7) entsprechend Fig. 1, 2, 3 in der unmittelbaren Nähe der höchstmöglichen Laserstrahl-Leistungsdichte (8) befindet, ist eine Gefährdung für den Benutzer des Gerätes und sein Umfeld in Zusammenhang mit dem Gesamtverlauf des Laserstrahles Fig.1 (8, 9) bei normalem Gebrauch und dem vorgegebenen Leistungsbereich unmöglich.

Nach Unteranspruch 5 wird eine low-power Leuchtdiode, meist mit einem Betriebsstrom von  $\leq 1\text{mA}$  (3) zur erforderlichen Anzeige des Betriebszustandes des Gerätes eingesetzt. Die Eigentherapie von Herpes simplex (labialis) sollte hierbei zweckmäßig vor einem Spiegel erfolgen, 1S um die Kontrolldiode (3) beobachten zu können. Dieser Nachteil kann durch einen zusätzlichen akustischen Signalgeber geringer Baugröße ausgeglichen werden. Eventuell kann dann auf die optische Anzeige verzichtet werden, so man die Geräuschbelästigung zu tolerieren bereit ist.

Die für die Therapie, bzw. Stimulation von organischem Gewebe entscheidende Leistungsdichte wird entsprechend dem Unteranspruch 6 erreicht mit Hilfe einer veränderlichen Fokussiereinrichtung (2), unter Berücksichtigung der jeweils eingesetzten Laserdiode (1).

Die höchste Leistungsdichte auf dem zu behandelnden Gewebe, bei vorgegebener Laserdiode, wird erreicht wenn sich der Fokus des Laserstrahles (8) unmittelbar vor der Strahlaustrittsöffnung befindet. Beim Einsatz von Laserdioden, die eine größere optische Ausgangsleistung ( $>3\text{ mW}$ ) haben, kann es erforderlich werden, den einstellbaren Fokus in den Bereich des Gehäuses zurückzunehmen. Dies hat zur Folge, daß der Laserstrahl an der Austrittsöffnung im Bereich des Sensorringes (7) einen größeren Durchmesser aufweist bei zugleich reduzierter Leistungsdichte. Bei konstanter Gewebeoberflächengröße bedeutet dies eine verkürzte Bestrahlungsdauer.

Eine Verstellmöglichkeit des Fokus im Strahlenverlauf des Lasers wird auch in Anlehnung an die landesunterschiedlichen gesetzlichen Anforderungen geschehen. Zum Beispiel durch ein Verschieben der Optik (2) im Gehäuse, nachdem die Gehäuseabdeckung Fig.1 (10) geöffnet wurde, oder durch entsprechende Stellschrauben, die von außen zugänglich sind. Natürlich kann der gleiche Effekt durch entsprechende Positionsveränderung der Laserdiode (1) erreicht werden.

Entscheidend für die Sicherheit ist ein vorgegebener mechanischer Anschlag im Bereich der Verstell-einrichtung, der es verhindert, daß der Fokus des Laserstrahles im Verlauf weiter vor die Austrittsöffnung verlegt werden kann.

Für den speziellen Akupunktur - Anwendungsbereich wird das Subminiatur-Therapie-Lasergerät entsprechend dem (9 Unteranspruch 7 mit einem in der Frequenz einstellbaren Modulator für den Bereich 0,5 bis 30 Hz ausgerüstet. Die Frequenz wird mit Hilfe eines passenden Leistungs- und Modulationsmeßgerätes Fig. 4 (22) genau eingestellt (19). Dazu befindet sich in Höhe der Steuerelektronik (5, 11) ein Trimpotentiometer, der von außen mit einem Schraubendreher verstellt werden kann. Die Modulation kann über einen Microswitch von außen zu-, bzw. abgeschaltet werden.

Die gesamte erforderliche Steuerelektronik ist entsprechend dem zur Verfügung stehenden Raumangebot vorzüglich in SMD-Technik gefertigt und in den Bereichen (5), (11) und (12) angeordnet.

Um die abgestrahlte Laserleistung genau bestimmen zu können, wird entsprechend dem Unteranspruch 8 ein Laserleistungs- und Modulationsmeßgerät Fig. 4 (22) eingesetzt, das entsprechend seiner Formgebung das Subminiatur-Therapie-Lasergerät so aufnehmen kann, daß es dies in Betrieb setzen kann und die abgestrahlte Laserleistung und ggf. Modulation anzeigt.

Das unter Fig. 4 dargestellte System enthält das Subminiatur-Therapie-Lasergerät (16) in seiner Originalgröße und das Laserleistungs- und Modulationsmeßgerät (22). Das Meßgerät (22) sollte eine

Anzeige im Bereich von mW (21) haben, um die abgegebene Laserleistung zu messen sowie eine getrennte Anzeige in Hz (19) für die genaue Einstellung und Anzeige der Laserstrahlmodulation.

Die von dem optischen Sensor (17) erfaßte Laserstrahlung wird über eine Auswertungs- und Treiberstufe (18) den Anzeigeelementen (19, 21) zugeleitet. Die Stromversorgung (20) befindet sich im Gerät.

5

### Erzielbare Vorteile

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, daß das beschriebene Subminiatur-Therapie-Lasergerät die für die Soft-Laser-Therapie, bzw. Biostimulation von organischem Gewebe erforderliche Leistungsdichte mit billigen, aus der Massenfertigung stammenden cw - Laserdioden mit geringer Ausgangsleistung, erreicht.

Bedingt durch die bei dieser Erfindung erreichte Baugröße, wird ein Therapie-Lasergerät hergestellt, das in jeder Hemden- und Hosentasche problemlos wie ein Feuerzeug zu tragen ist und somit immer und fast überall dem Anwender zur Verfügung stehen kann.

Die Einsatzmöglichkeit entspricht allen möglichen Anwendungsgebieten der herkömmlichen Großgeräte. Bauartbedingt ist das Gerät nur für wenige Applikationen der Soft- oder Mid-Laser-Therapie ungeeignet, wie bei der Behandlung von Ulcera, frischen Wunden, Anwendungen im dental-medizinischen Bereich und überall dort, wo bei großflächiger Anwendung geringe Bestrahlungszeit gefordert wird.

Für den Anwendungsbereich von Herpes simplex (labialis) kann die erforderliche Therapiedauer durch einen verzögerten Behandlungsbeginn sehr stark verlängert werden. Bei bereits gut sichtbaren Lippenbläschen des Patienten können bis zum Abheilen mit täglicher Soft-Laser-Behandlung 2 bis 5 Tage vergehen. Erfolgt hingegen eine Laser-Behandlung mit dem Subminiatur-Therapie-Laser 780 nm und 3mW von 2 bis 4 Minuten Dauer (je nach Größe der befallenen labialen Stelle), unmittelbar nachdem der Patient den akuten Herpes verspürt, so reicht in der Regel eine einmalige Bestrahlung und es kommt nicht zum Ausbruch der labialen Bläschen.

Für die Laser-Akupunktur wird das Gerät entsprechend Unteranspruch 7 mit einem Modulator ausgerüstet, so daß unter Berücksichtigung des Unteranspruchs 8 mit einstellbaren Modulationsfrequenzen nach Nölgier gearbeitet werden kann.

Ein sicherer Funktions- und Leistungstest des Subminiatur-Therapie-Lasergerätes ist durch die Formgebung des Gehäuses in Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Testgerätes entsprechend dem Beispiel in Fig.4 gewährleistet, so daß bei dem Meßvorgang keinerlei Streustrahlung austreten kann. Zugleich wird die genaue Einstellung einer Modulationsfrequenz ermöglicht, ohne das eigentliche Therapiegerät in seiner Konstruktion mit dieser Einrichtung zu belasten.

Entsprechend den verfügbaren Laserdioden kann das Gerät für verschiedene Wellenlängen des Laserlichtes hergestellt werden, bevorzugt jedoch für 780 nm oder 670 nm, da diese Bereiche im therapeutisch wirksamen Spektrum sind und zugleich für das Auge noch sichtbar und somit höhere Sicherheit bieten.

Das entsprechend dem Oberanspruch 1 ausgebildete Gerät weist für seine Baugröße ein Höchstmaß an autonomer Sicherheit auf, bedingt durch die große Strahldivergenz im weiteren Verlauf des Laserstrahles außerhalb des Gerätes sowie des zusätzlichen Sensorschalters im unmittelbaren Strahlaustrittsbereich.

Das Gerät ist somit im humanmedizinischen Bereich vorzüglich zur Eigentherapie geeignet und stellt im Bereich der Tiermedizin für den Anwender eine wesentliche Erleichterung in der Handhabung dar.

Bedingt durch eine einfach mögliche industrielle Massenfertigung dieses Subminiatur-Therapie-Lasergerätes, bei den zum Einsatz kommenden preiswerten Komponenten, eignet sich das Gerät zugleich als kostengünstiges Soft-Laser-Gerät für jeden Anwender.

### Ansprüche

50

1. Subminiatur-Therapie-Lasergerät zur Biostimulation von organischem Gewebe, bevorzugt einsetzbar zur therapeutischen Behandlung von Herpes simplex zur Laser-Akupunktur und zur Schmerzbekämpfung, dadurch gekennzeichnet, daß es bei einem Gehäusevolumen von ca. 50 bis 65 cm<sup>3</sup> batterie- oder akkubetrieben ist und die verwendete cw-Laserdiode im sichtbaren roten bis nahen IR-Bereich mit einer optischen Leistung von 0,5 bis 10 mW liegt und der Laserstrahl durch wenigstens eine Konvexlinse so fokussiert wird, daß auf dem zu therapierenden Gewebe eine relativ hohe Leistungsdichte vorliegen kann und zugleich geringe Gefahr für das menschliche Auge besteht, bedingt durch die große Divergenz und geringe Leistungsdichte im weiteren Verlauf des Laserstrahles.

55

2. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät bei einer optischen Ausgangsleistung bis 5 mW nur eine Betriebsspannung von 1 bis 1,6 Volt benötigt, bedingt durch einen integrierten miniaturisierten Gleichspannungswandler.
3. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Gerät für eine  
5 höhere optische Ausgangsleistung bis zu 10 mW auch mit 3 x 1,5 Volt Micro Alkaline Batterien oder vergleichbaren Akkus ausgerüstet sein kann (13, 14, 15).
4. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Einschalten des Lasers nur über einen Sensorring oder mechanischen Schaltkontakt möglich ist, der sich am Rand der Laserstrahlaustrittsöffnung nach Fig. 1-3 (7) befindet.
- 10 5. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine Anzeige des Betriebszustandes des Gerätes durch eine low-power Leuchtdiode (3) oder (und) einen akustischen Signalgeber geringer Baugröße gegeben ist.
6. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Fokus (8) des Laserstrahles in soweit veränderlich ist, daß er durch eine variable Optik unmittelbar vor den Sensorring (7)  
15 bis ca. 1cm hinter den Sensorring verstellbar ist.
7. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Ansteuerelektronik der Laserdiode (5, 11 ) für den speziellen Akupunktur - Anwendungsbereich einen frequenzvariablen Modulator für den Bereich von 0.5 bis 30 Hz enthalten kann.
8. Subminiatur-Therapie-Lasergerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Formgebung des  
20 Gehäuses einen Einschub in ein mobiles Laser-Leistungs- und Modulationsmeßgerät erlaubt; Fig. 4.

25

30

35

40

45

50

55

Fig.1

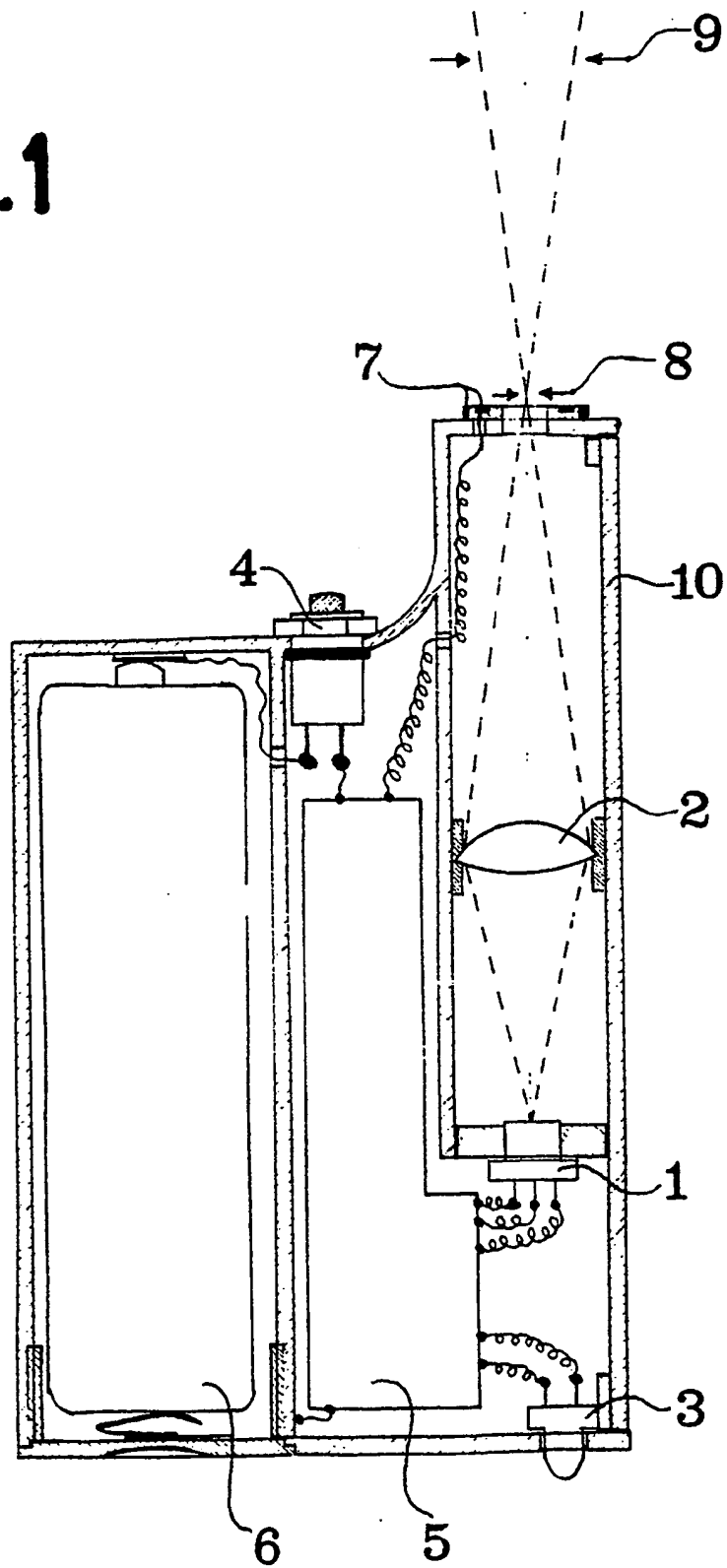


Fig. 2

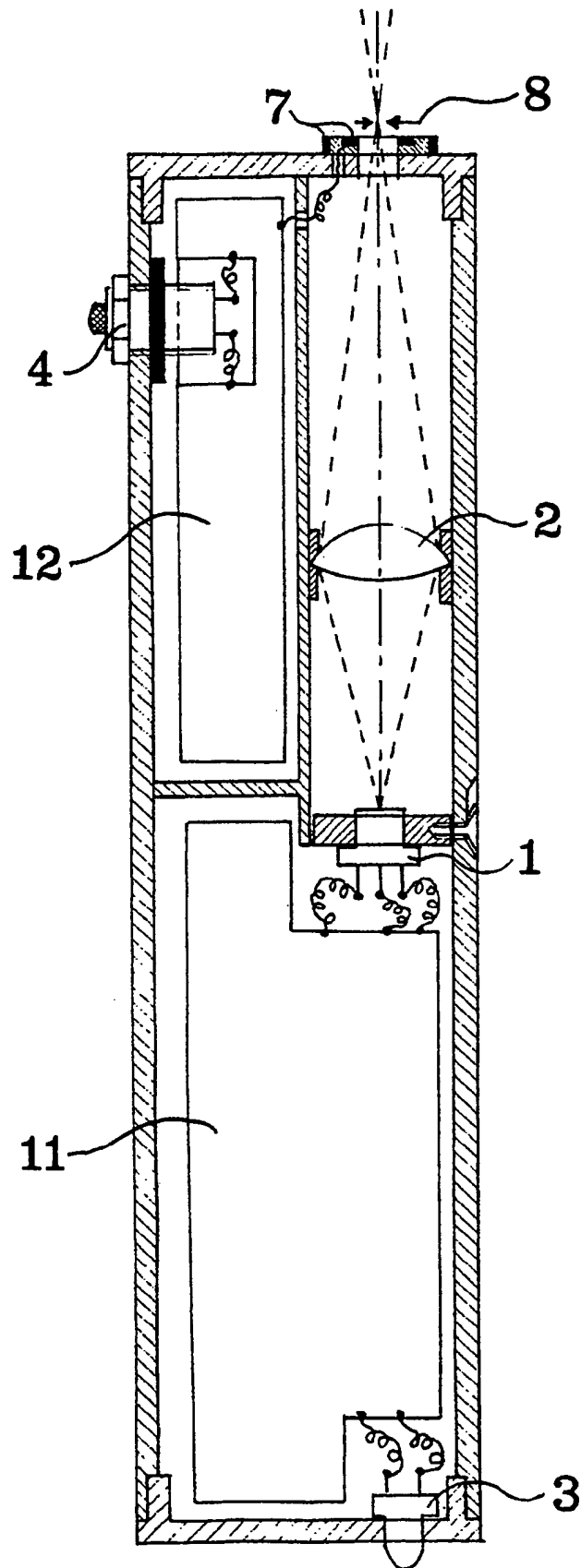


Fig.3


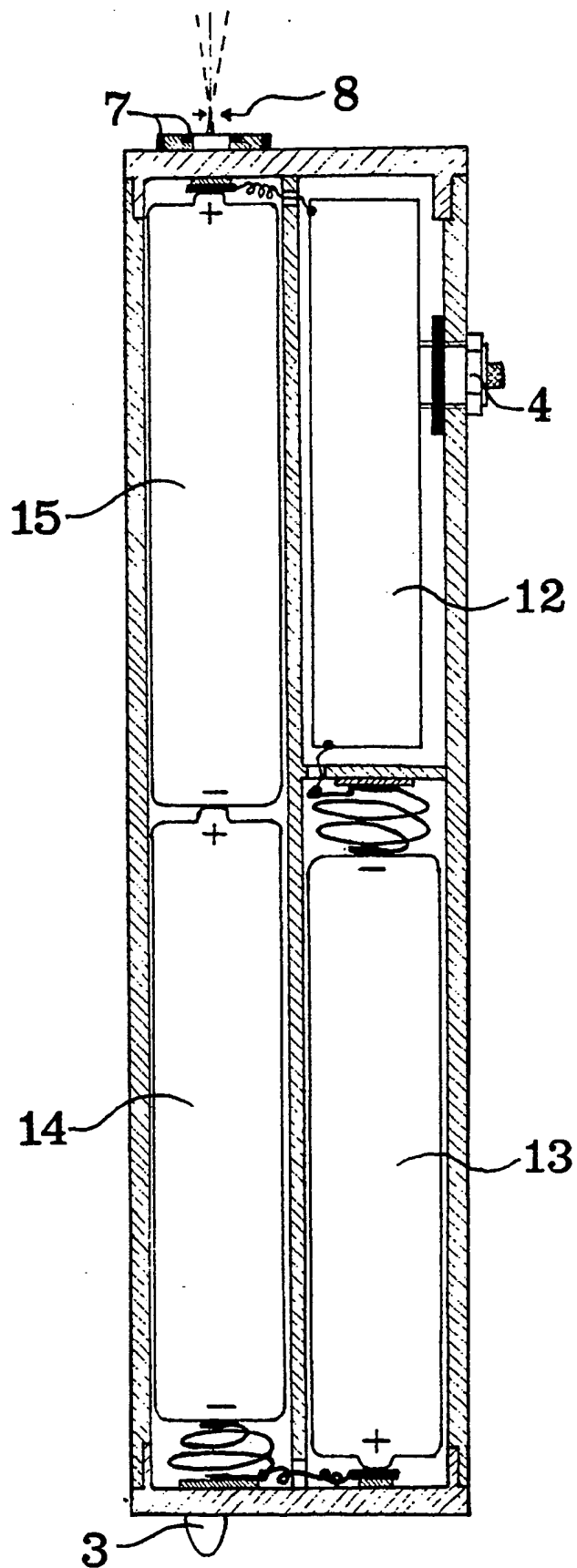


Fig.4





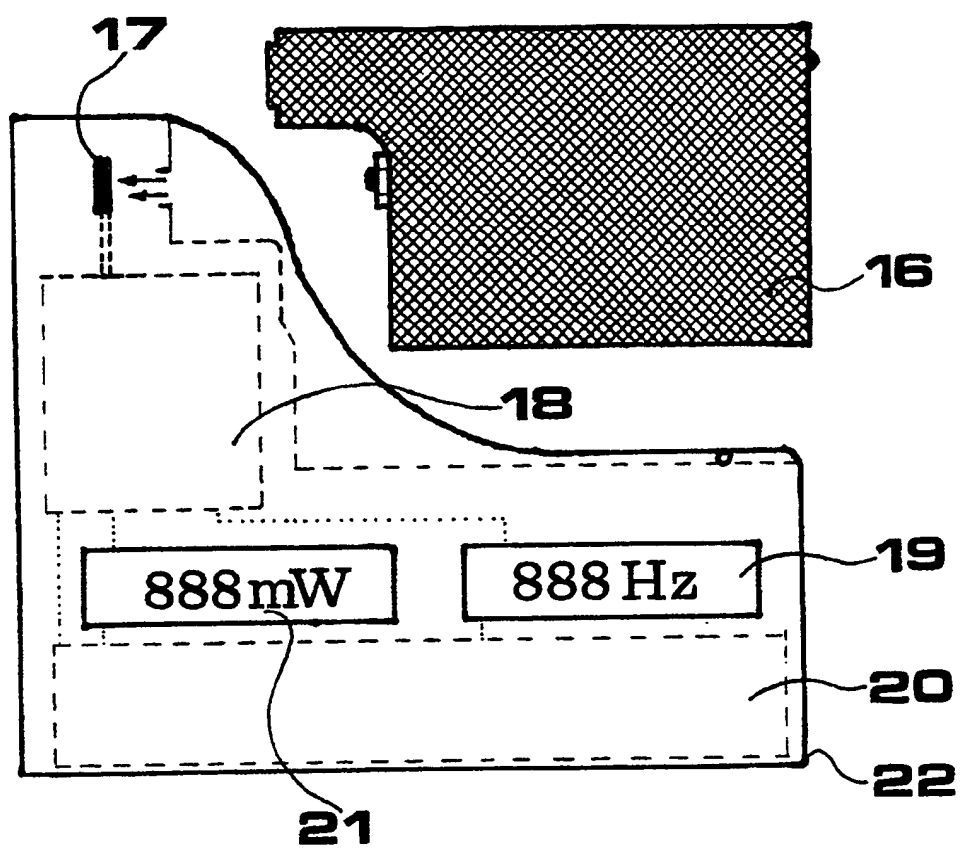

Europäisches  
Patentamt

# EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 11 6523

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	DE-A-3 226 507 (NAGY) * Ansprüche 1,2,5,7,9,11; Figur 1 * ---	1-7	A 61 N 5/06 A 61 H 39/00
Y	EP-A-0 272 325 (MEDICAL LASER RESEARCH) * Zusammenfassung; Figur 1 * ---	1-7	
A	EP-A-0 298 138 (CASTELLI) * Anspruch 1; Figur 1 * -----	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			A 61 N A 61 H A 61 B
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 12-04-1990	
		Prüfer MOERS R.J.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			
T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument ..... & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**